

Verbesserter
Verschluss!

Langzeitdrainage für Analfisteln


- Erste Drainage ohne Knoten
- Maximaler Patientenkomfort
- Erstes für den Zweck zugelassenes Medizinprodukt

Comfort Drain

Comfort Drain: einfach überzeugend

Der Comfort Drain ist in der Anwendung sehr einfach. Ein komplett vorkonfektioniertes, steriles Set aus biegsamer Sonde, Silikon-Drain und neuartigem Verschluss macht das Arbeiten im OP einfach und effizient. Vor allem der einfache Verschlussmechanismus, der ohne zusätzliches Nahtmaterial und ohne Knoten auskommt, macht einen Unterschied: Weniger ist in diesem Fall mehr.


Nicht nur für den Operateur ist die Anwendung überzeugend. Gerade für den Patienten stellen Langzeitdrainagen von Analfisteln eine Beeinträchtigung im täglichen Leben dar. Der durchschnittliche Erwachsene verbringt am Tag 11,5 Stunden im Sitzen. Und hier spielt der Comfort Drain seine Vorteile aus. Die Miniaturisierung des Drainagesystems und die Abwesenheit zusätzlicher Nähte und Knoten führt zu weniger Hautirritationen und einem erhöhten Komfort, vor allem in sitzender Position.

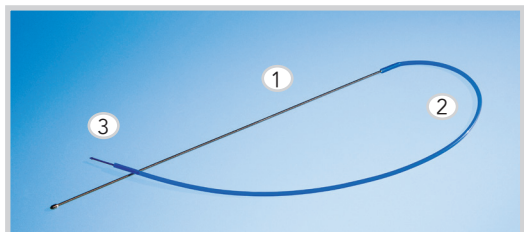

Der Comfort Drain von A.M.I. besteht aus drei Komponenten:
1) Metallsonde, 2) Silikondrainage, 3) Polypropylen-Verschluss

Der Comfort Drain wird zur Behandlung von inter-, trans- und suprasphinkteren Analfisteln verwendet und ist das erste für diese Anwendung zugelassene Medizinprodukt. Die weiche Silikon-Drainage wird mit der Sonde platziert und als komplett geschlossener Ring angelegt. Durch diese Maßnahme entsteht ein fibrosierender Fistelkanal als sichere Vorbereitung auf eine spätere Fistel-Operation. Einen sehr wichtigen Stellenwert hat die Langzeitfadendrainage auch bei der Behandlung von Crohn-Fisteln, für die der Comfort Drain ideal geeignet ist.

Beispiel: Anlegen des Comfort Drain im OP und Entfernung nach 8 Wochen

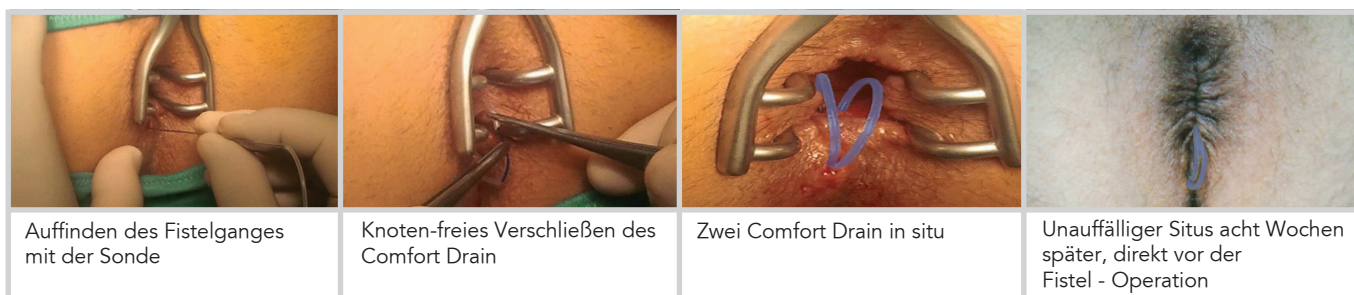

Die Vorteile des Comfort Drain auf einen Blick:

- Das erste für den Einsatz zugelassene Medizinprodukt
- Komplette geschlossener Ring: Die erste Drainage ohne Knoten
- Reduktion entzündlicher Hautirritationen in der Vorbereitung auf die Fistel-Operation
- Stark gesteigerter Komfort für den Patienten

Bestellnummer	Produkt	Technische Daten
CDS2001	Comfort Drain Langzeitfadendrainage zur Behandlung von Analfisteln	Lieferumfang: Set aus Silikon Drainage mit Metall-Sonde steril geliefert 10 Stück / Box
CDS2010	Comfort Drain Grasper Vereinfacht das Verschließen des Comfort Drains	unsteril geliefert 1 Stück

Diese Produkte entsprechen den Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG und sind entsprechend mit der CE-Kennzeichnung versehen.

A.M.I. in Österreich:

A.M.I. GmbH
 Im Letten 1
 6800 Feldkirch
 Österreich
 t +43 5522 90505-0
 f +43 5522 90505-4006
 e info@ami.at
www.ami.at

A.M.I. in Deutschland:

A.M.I. Deutschland GmbH
 Morellstraße 33
 86159 Augsburg
 Deutschland
 t +49 821 450 515 0
 f +49 821 450 515 20
 e info@ami-deu.de

A.M.I. in der Schweiz:

FUMEDICA AG
 Luzernerstrasse 91
 5630 Muri
 Schweiz
 t +41 56 675 9100
 f +41 56 675 9109
 e fumedica@fumedica.ch

CE0297



CDS2001

CDS2010



A.M.I.®