



**Clip-a-Port.
Schnell und clever.
Die leicht zu fixierenden Ports von A.M.I.**

Die integrierte Kufe ermöglicht eine schnelle und sichere Befestigung im Gewebe. Für Ihre individuellen Bedürfnisse bietet A.M.I. eine Vielzahl an Port-Katheter Systemen an.

- Zwei verschiedene Kathetergrößen
- Standardhöhe oder superflaches Design

A.M.I.® Clip-a-Port

Das A.M.I. Clip-a-Port System ist ein einzigartiges Port-Katheter-System für die venöse Zufuhr von Medikamenten, Flüssigkeiten und Nährlösungen.

Die auf der Unterseite des Ports befindliche Kufe ermöglicht die Fixierung des Ports auf einfache und sichere Weise - ohne Nähte und ohne Zeitverlust.



Die A.M.I. Clip-a-Port Systeme sind für Hochdruck-Injektionen geeignet und ermöglichen eine Verwendung bis zu 5 ml/s und 325 psi (2240 kPa).

- Große Silikon-Membran zur sicheren Einführung der Nadel
- Port-Oberseite mit doppeltem Sicherheitsrand, um ein Abrutschen der Nadel zu verhindern
- Katheter aus strahlenundurchlässigem Material mit Längenmarkierungen
- besonders weiche Katheterspitze
- biokompatible Materialien (Titan, Silikon und Polyurethan)
- MR-kompatibel bis 3 Tesla; latexfrei

Port für offene Implantationen (Cutdown)

- Port mit Punktionsschutz für den Katheter
- Einlumenkatheter aus Polyurethan
- Venenhäkchen
- Tunneller
- atraumatische Spülnadel
- A.M.I. Port-Nadel
- 5 cc Spritze

7-teiliges Set, steril geliefert

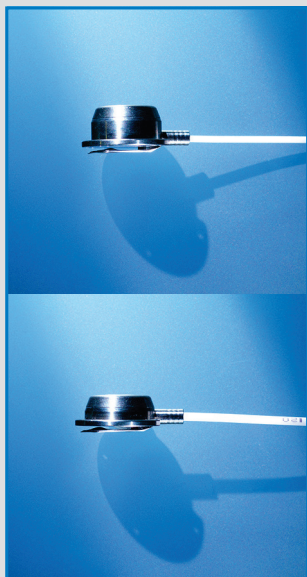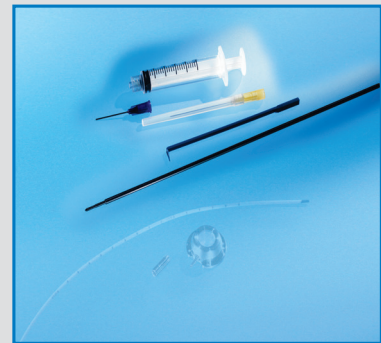

Technische Informationen

Durchmesser der Silikon-Membran:	12 mm
Länge des Katheters:	500 mm

Standard Design

Höhe des Ports (ohne Clip):	13 mm
Kathetergröße F6:	CPS6751
Kathetergröße F8:	CPS6791

Flaches Design

Höhe des Ports (ohne Clip):	9,8 mm
Kathetergröße F6:	CPS6771
Kathetergröße F8:	CPS6711


A.M.I.® Clip-a-Port



Port mit Einführset (Cutdown oder Seldinger)

- Port mit Punktionsschutz für den Katheter
- Einlumenkatheter aus Polyurethan
- Venenhäkchen
- Tunneller
- atraumatische Spülnadel
- A.M.I. Port-Nadel
- 5 cc Spritze
- Seldinger Venen-Punktionsnadel 18 G
- Dilatator / Spalthülse für F6 oder F8
- Führungsdraht (Guidewire)

10-teiliges Set, steril geliefert

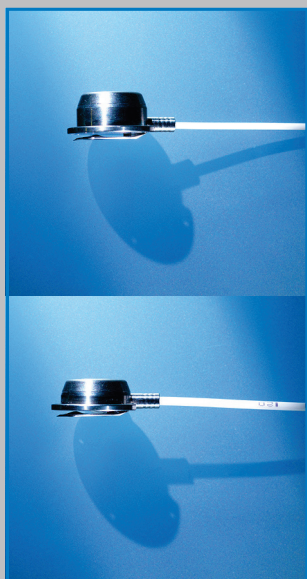

Technische Informationen

Durchmesser der Silikon-Membran:	12 mm
Länge des Katheters:	500 mm



Standard Design

Höhe des Ports (ohne Clip):	13 mm
Kathetergröße F6:	CPS6741
Kathetergröße F8:	CPS6781

Flaches Design

Höhe des Ports (ohne Clip):	9,8 mm
Kathetergröße F6:	CPS6761
Kathetergröße F8:	CPS6701

A.M.I.® Clip-a-Port

Bestellnummer	Produkt	Technische Details
CPS6751	Clip-a-Port F6 - Titan Infusionsport mit integriertem Clip in Standardhöhe und F6 Katheter	1 Set, 7-teilig (Cutdown) Steril geliefert
CPS6791	Clip-a-Port F8 - Titan Infusionsport mit integriertem Clip in Standardhöhe und F8 Katheter	1 Set, 7-teilig (Cutdown) Steril geliefert
CPS6771	Clip-a-Port slimline F6 - Titan Infusionsport mit integriertem Clip in "slimline" Höhe und F6 Katheter	1 Set, 7-teilig (Cutdown) Steril geliefert
CPS6711	Clip-a-Port slimline F8 - Titan Infusionsport mit integriertem Clip in "slimline" Höhe und F8 Katheter	1 Set, 7-teilig (Cutdown) Steril geliefert
CPS6741	Clip-a-Port F6 kit - Titan Infusionsport mit integriertem Clip in Standardhöhe und F6 Katheter - Catheter F6 Introducer Set	1 Set, 10-teilig (Cutdown oder Seldinger) Steril geliefert
CPS6781	Clip-a-Port F8 kit - Titan Infusionsport mit integriertem Clip in Standardhöhe und F8 Katheter - Catheter F8 Introducer Set	1 Set, 10-teilig (Cutdown oder Seldinger) Steril geliefert
CPS6761	Clip-a-Port slimline F6 kit - Titan Infusionsport mit integriertem Clip in "slimline" Höhe und F6 Katheter - Catheter F6 Introducer Set	1 Set, 10-teilig (Cutdown oder Seldinger) Steril geliefert
CPS6701	Clip-a-Port slimline F8 kit - Titan Infusionsport mit integriertem Clip in "slimline" Höhe und F8 Katheter - Catheter F8 Introducer Set	1 Set, 10-teilig (Cutdown oder Seldinger) Steril geliefert
CPS6941 	Catheter F6 Introducer Set Seldinger Einführset F6 Katheter bestehend aus: - Seldinger Venen-Punktionsnadel 18 G - Dilator / Spalthülse für F6 - Führungsdraht (Guidewire)	1 Set Steril geliefert
CPS6951 	Catheter F8 Introducer Set Seldinger Einführset F6 Katheter bestehend aus: - Seldinger Venen-Punktionsnadel 18 G - Dilator / Spalthülse für F8 - Führungsdraht (Guidewire)	1 Set Steril geliefert

A.M.I. in Österreich:

A.M.I. GmbH
Im Letten 1
6800 Feldkirch
Österreich
t +43 5522 90505-0
f +43 5522 90505-4006
e info@ami.at
www.ami.at

A.M.I. in Deutschland:

A.M.I. Deutschland GmbH
Morellstraße 33
86159 Augsburg
Deutschland
t +49 821 450 515 0
f +49 821 450 515 20
e info@ami-deu.de

A.M.I. in der Schweiz:

FUMEDICA AG
Luzernerstrasse 91
5630 Muri
Schweiz
t +41 56 675 9100
f +41 56 675 9109
e fumedica@fumedica.ch



A.M.I.®