

A.M.I.® Easy Instrument System

Produktgruppe Laparoskopie | Ausgabe 04/2012



> A.M.I. Easy Instrument System - variabel, durchdacht und jetzt auch rückenschonend!

- Wiederverwendbare Instrumente mit oder ohne Ratsche
- Integrierte, manuell bedienbare Kauterfunktion für mehr Bewegungsfreiheit der Chirurgen, somit weniger Rückenschmerzen
- Völlig zerlegbar für schnelle, gründliche Reinigung
- Verschiedene Einweg- oder Mehrwegspitzen für sicheres Schneiden, Fassen, Sezieren und Halten von Gewebe

A.M.I.® Easy Instrument System

A.M.I. Easy Instrument Premium und EasyAct

Wiederverwendbare laparoskopische Instrumente: Kostenkontrolle und perfekte Schneidleistung in einem.

- Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht sicheres Arbeiten.
- Das Instrument ist völlig zerlegbar und kann somit schnell und gründlich gereinigt werden.
- Durch die farbkodierten Griffe gibt es keine Verwechslung der Instrumente.
- Einzeln gefräste Scherenspitzen bieten eine unübertroffene Schneidleistung.

Bestellnummer	A.M.I. Easy Instrument System	Technische Details
ESI1110 	A.M.I. Easy Instrument Premium Wiederverwendbares Instrument. Zur Verwendung mit den A.M.I. Easy Instrument Premium Spitzen, insbesondere den Scherenspitzen.	5 mm; Länge des Schaftes: 330 mm 360° drehbarer Schaft Vollständig zerlegbar 1 Instrument Unsteril geliefert, dampfsterilisierbar
ECI1010 	A.M.I. EasyClinch Instrument Premium Wiederverwendbares Instrument mit Ratsche. Zur Verwendung mit den A.M.I. Easy Instrument Premium Spitzen, insbesondere den Clinch- und Easy Finger-Aufsätzen.	5 mm; Länge des Schaftes: 330 mm 360° drehbarer Schaft Vollständig zerlegbar 1 Instrument Unsteril geliefert, dampfsterilisierbar
EAS1020 	EasyAct Wiederverwendbares Instrument mit integrierter, manuell bedienbarer Kauterfunktion. Zur Verwendung mit den A.M.I. Easy Instrument Premium Spitzen, insbesondere den Scherenspitzen.	5 mm; Länge des Schaftes: 330 mm 360° drehbarer Schaft Vollständig zerlegbar 1 Instrument Unsteril geliefert, dampfsterilisierbar
ECA1020 	A.M.I. HF-Cable Martin HF-Kabel zur Verbindung von EasyAct oder EasyAct-R mit einem HF-Chirurgiegerät von KLS Martin. Für monopolare Anwendung.	Länge des Kabels: 3 m 1 Kabel Unsteril geliefert, dampfsterilisierbar
ECA1030 	A.M.I. HF-Cable Erbe HF-Kabel zur Verbindung von EasyAct oder EasyAct-R mit einem HF-Chirurgiegerät von Erbe. Für monopolare Anwendung.	Länge des Kabels: 3 m 1 Kabel Unsteril geliefert, dampfsterilisierbar
ECA1040 	A.M.I. HF-Cable ValleyLab HF-Kabel zur Verbindung von EasyAct oder EasyAct-R mit einem HF-Chirurgiegerät von ValleyLab. Für monopolare Anwendung.	Länge des Kabels: 3 m 1 Kabel Unsteril geliefert, dampfsterilisierbar
ECA1110 	A.M.I. HF-Cable Adapter Für die Verbindung der A.M.I. HF-Kabel mit anderen Instrumenten.	1 Adapter Unsteril geliefert, dampfsterilisierbar

A.M.I.® Easy Instrument System

Neue Vorteile mit dem EasyAct



- Aktivierung des Stromflusses durch Drücken des Tastknopfs am Instrumentengriff
- keine Aktivierung des Stromflusses durch ein Fußpedal nötig (jedoch möglich)
 - = sicherer Stand
 - = keine zusätzlichen Pedale unter dem Operationstisch nötig
 - = mehr Bewegungsfreiheit während langer OP-Zeiten
 - = rückschonendes Arbeiten

- Für alle laparoskopischen Operationen, z.B.
 - lap. Hernienchirurgie
 - lap. Sigmaresektion
 - lap. Fundoplikatio

A.M.I. EasyShears - Perfektes Schneiden, einfache Reinigung, bestes Preis-Leistungsverhältnis




- Sterile Einweg-Scherenspitzen bieten höchste und sichere Schneidleistung
- Sterilisierbare Mehrweg-Scherenspitzen sind kostengünstig und umweltfreundlich
- Extra lange Scherenspitzen für Anwendungen bei übergewichtigen Patienten
- Jedes Scherenblatt wird einzeln gefräst und bietet eine unübertroffene Schneidleistung

A.M.I. EasyClinch - Für sicheres, atraumatisches Fassen und Halten




- Der besonders weite Öffnungswinkel erlaubt ein sicheres Fassen auch von größten Gallensteinen
- Verlässliches Fassen und Halten, ohne das Gewebe zu penetrieren
- Extra langer Clinch für Anwendungen bei übergewichtigen Patienten

A.M.I. EasyFinger - Flexible Fingerspitze zum Durchziehen und Platzieren von Magenbandimplantaten

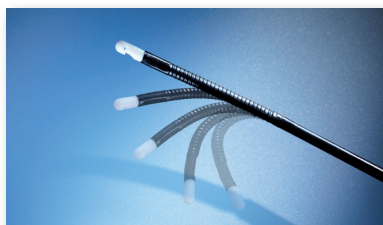

- Spezielle Geometrie für das Einhängen und Festhalten von Schlingen
- Flexible, arretierbare Finger-Spitze mit einer Beugung von maximal 110°
- Extra langer mit einer PTFE-Folie umhüllter Schaft für den Gebrauch bei fettleibigen Patienten

A.M.I. EasyHook - Der Geheimtipp für präzise Präparation

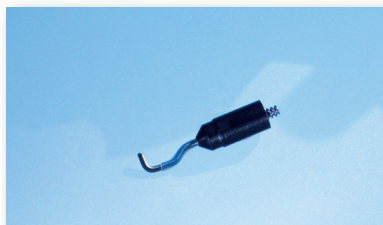

- Einmal verwendbarer, weit isolierter Elektrokauterhaken zur Gewebpräparation und Koagulation
- Schnelle, sichere und kontrollierte Präparation
- Umweltschonend durch einen minimalen Materialeinsatz

NEU
EasyHook

A.M.I.® Easy Instrument System

Alle Spitzen können mit jedem der drei Handgriffe (ESI1110, ECI1010, EAS1020) verwendet werden.

Bestellnummer	A.M.I. EasyShears	Technische Details
ESI1131	A.M.I. EasyShear Disposable Tips Premium Einmal verwendbare Scherenspitzen.	Gebogene Metzenbaum Schneideblätter, Länge: 16 mm Steril geliefert 10 Scherenspitzen / Box
ESI1151	A.M.I. EasyShear Mini Disposable Tips Premium Einmal verwendbare Scherenspitzen.	Gebogene Metzenbaum Schneideblätter, Länge: 10 mm Steril geliefert 10 Scherenspitzen / Box
ESI1120	A.M.I. EasyShear Reusable Tips Premium Mehrfach verwendbare Scherenspitzen.	Gebogene Metzenbaum Schneideblätter, Länge: 16 mm Unsteril geliefert, dampfsterilisierbar 5 Scherenspitzen / Box
ESI1140	A.M.I. EasyShear Mini Reusable Tips Premium Mehrfach verwendbare Scherenspitzen.	Gebogene Metzenbaum Schneideblätter, Länge: 10 mm Unsteril geliefert, dampfsterilisierbar 5 Scherenspitzen / Box
ESI1161	A.M.I. EasyShear Bariatric Disposable Tips Einmal verwendbare Scherenspitzen zur Anwendung bei fettleibigen Patienten bzw. bei jedem Eingriff, bei dem ein längeres Instrument benötigt wird.	Der Scherenaufsatz ist um 28 mm länger als bei ESI1131 Steril geliefert 10 Scherenspitzen / Box
Bestellnummer	A.M.I. EasyClinch	Technische Details
ECI1031	A.M.I. EasyClinch Disposable Tips Premium Einmal verwendbare Clinch-Spitzen.	Steril geliefert 10 Clinch-Spitzen / Box
ECI1041	A.M.I. EasyClinch Bariatric Disposable Tips Einmal verwendbare Clinch-Spitzen zur Anwendung bei fettleibigen Patienten bzw. bei jedem Eingriff, bei dem ein längeres Instrument benötigt wird.	Der Clinch-Aufsatz ist um 28 mm länger als beim ECI1031 Steril geliefert 10 Clinch-Spitzen / Box
Bestellnummer	A.M.I. EasyFinger Disposable	Technische Details
EFI3001	A.M.I. EasyFinger Disposable Einmal verwendbare flexible Fingerspitze zum Platzieren von Magenbandimplantaten.	Länge: 156 mm Steril geliefert 10 Fingerspitzen / Box
Bestellnummer	A.M.I. EasyHook	Technische Details
EDI1051	A.M.I. EasyHook Elektrokauterhaken für Gewebepräparation und Koagulation.	Steril geliefert 10 Haken / Box

A.M.I. in Österreich:

A.M.I. GmbH
Im Letten 1
6800 Feldkirch
Österreich
t +43 5522 90505-0
f +43 5522 90505-4006
e info@ami.at
www.ami.at

A.M.I. in Deutschland:

A.M.I. Deutschland GmbH
Morellstraße 33
86159 Augsburg
Deutschland
t +49 821 450 515 0
f +49 821 450 515 20
e info@ami-deu.de

A.M.I. in der Schweiz:

FUMEDICA AG
Luzernerstrasse 91
5630 Muri
Schweiz
t +41 56 675 9100
f +41 56 675 9109
e fumedica@fumedica.ch