
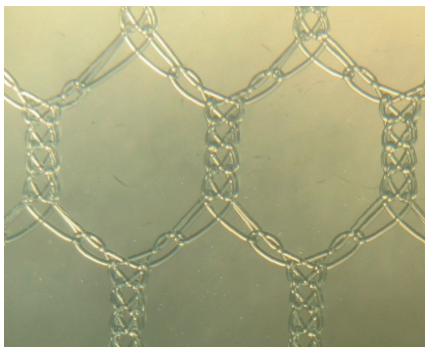


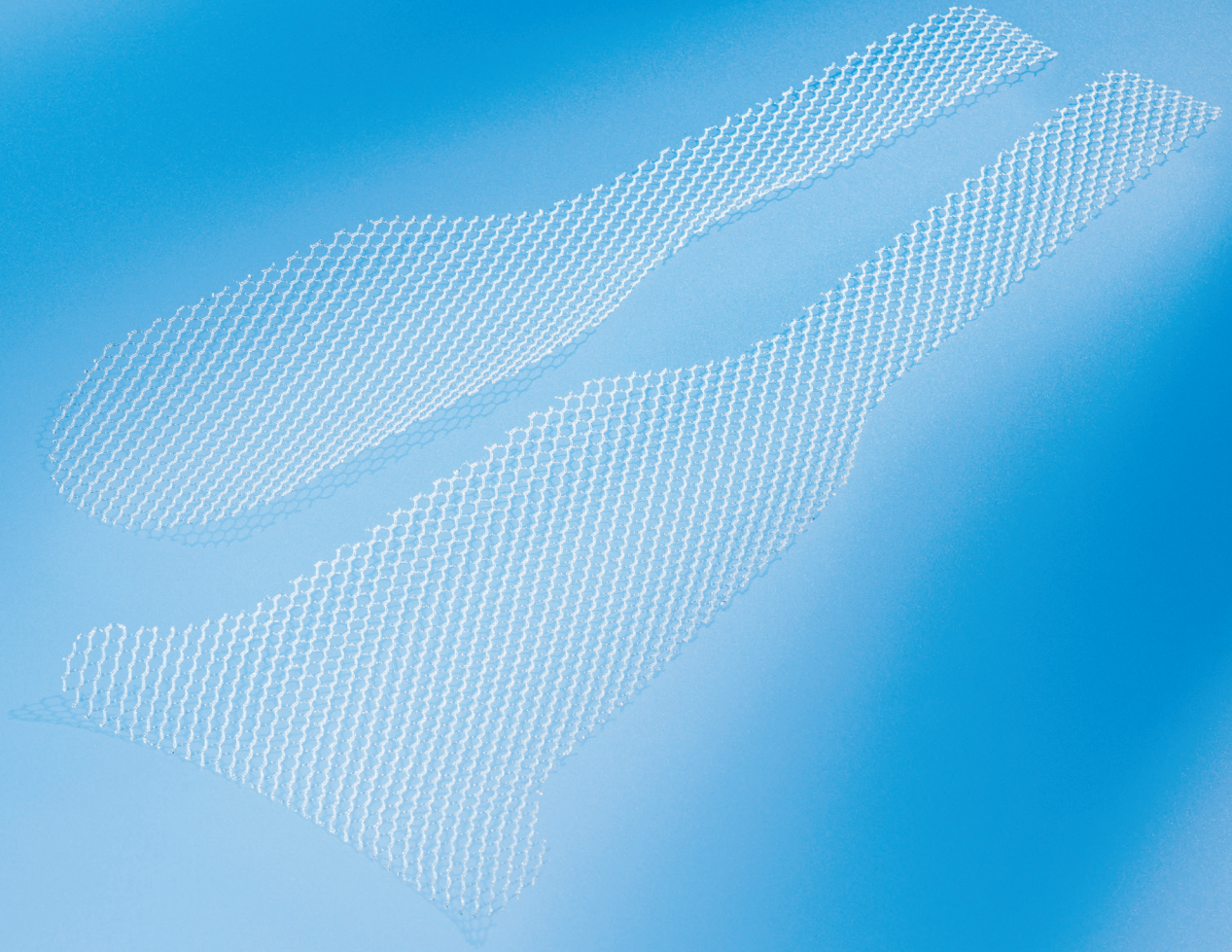

**Anteriores und posteriores Netz  
für die laparoskopische Sakrokolpopexie**

- Ultra-leichtes Netz: 21 g/m<sup>2</sup>
- Höchste Porosität: 93%
- Iso-Elastizität durch hexagonale Struktur


# PelviGYNious

Nach Deperitonealisieren des Scheidenstumpfes bzw. der Zervix, erfolgt die Scheidenwandpräparation. Durch tiefes Legen des dorsalen Netzes ins kleine Becken und ventral tief unter die Blase, bietet das PelviGYNious eine gute Korrektur der Zystozele/Rektozele, sowie durch Fixierung beider Netzanteile am Promontorium eine spannungsfreie apikale Suspension der proximalen Scheide.

## Welche Kriterien sind für eine effektive Prolaps-Therapie und hohe Patientenzufriedenheit relevant?

- Dauerhafte Flexibilität des Vaginalgewebes
- Beibehaltung einer leichten Apex-Mobilität
- Schnelles Einwachsen des Interponats mit guter Kollagen-Bildung und Revaskularisierung
- Eine dauerhafte und sichere Unterstützung gegen den Deszensus

## Das bietet das PelviGYNious

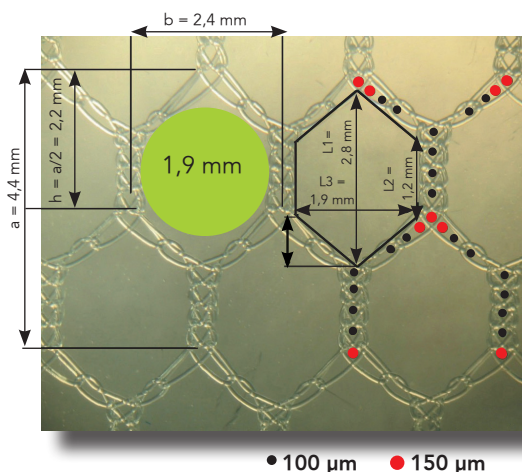

- Prolaps-Korrektur mit apikaler Stabilisierung
- Netzdoppelung erlaubt eine gute Fixation am Os Sacrum / Promontorium mit geringer, aber vorhandener Apex-Mobilität
- Iso-Elastizität im vaginalen Bereich, da das Vaginalgewebe in allen Richtungen beweglich bleiben sollte: hexagonale Struktur, leichter und weicher Netzkörper
- Minimales Flächengewicht für minimale Fremdkörperreaktion: 21 g/m<sup>2</sup>
- Höchste Netz-Porosität (93%) für eine großflächige Re-Kollagenisierung und Re-Vaskularisierung des Gewebes

## Prof. Dr. med. Gabriel Schär, Dr. med. Dimitri Sarlos - Frauenklinik Aarau, Schweiz:

„Das PelviGYNious Netz lässt sich hervorragend verwenden, Implantation und Netzfixierung erfolgen einfach und schnell. Wir vermuten eine sehr gute Gewebeverträglichkeit. Zudem ist das Netz bei postoperativen Untersuchungen kaum tastbar.“

| Bestellnummer | Produkt                                                                                                    | Technische Details                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PFR5651       | <b>PelviGYNious</b><br><br>Polypropylen-Interponat zur abdominellen Sakrokolpopexie oder Zervikosakropexie | Iso-elastisches Netz,<br>21 g/m <sup>2</sup> ,<br>Porosität 93%<br><br>1 Implantat<br><br>steril geliefert |

### A.M.I. in Österreich:

A.M.I. GmbH  
Im Letten 1  
6800 Feldkirch  
Österreich  
t +43 5522 90505-0  
f +43 5522 90505-4006  
e info@ami.at  
[www.ami.at](http://www.ami.at)

### A.M.I. in Deutschland:

A.M.I. Deutschland GmbH  
Morellstraße 33  
86159 Augsburg  
Deutschland  
t +49 821 450 515 0  
f +49 821 450 515 20  
e info@ami-deu.de

### A.M.I. in der Schweiz:

FUMEDICA AG  
Luzernerstrasse 91  
5630 Muri  
Schweiz  
t +41 56 675 9100  
f +41 56 675 9109  
e fumedica@fumedica.ch



**A.M.I.**<sup>®</sup>